


FRA

DEU

GBR

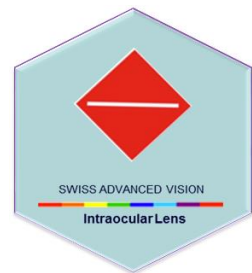

# InFo

Instructions d'utilisation

Gebrauchsanweisung

Instructions for Use



**SAV-IOL SA**

Route des Falaises 74  
2000-Neuchâtel  
Switzerland

[info@sav-iol.com](mailto:info@sav-iol.com)

Main number [+41 32 566 54 00](tel:+41325665400)

Phone regulatory affairs [+41 32 566 54 08](tel:+41325665408)

Fax regulatory affairs [+41 32 566 54 09](tel:+41325665409)



Spécifications techniques  
Technische Spezifikationen  
Technical Features

Table: 1

Type de l'optique: Diamètre externe: Diamètre de la zone optique: Matériau:	Biconvexe 9.0 à 13.0 mm 6.0 mm Acrylique hydrophile 26% transparent
Puissance: Index de réfraction Transmittance $\leq$ 10%: Haptiques : Angulation :	+5.0D à +30.0D avec pas de 0.5D 1.457 à 35°C < 370 nm Multilink 4 points d'attachement Pas d'angulation 0°
Optik Typ: Gesamtlänge: Optikdurchmesser: Material: IOL-Stärke: Brechungsindex: UV-Reduktion $\leq$ 10%: Haptik-Konfiguration : Haptikwinkel:	Bi-konvex 9.0 bis 13.0 mm 6.0 mm hydrophiles Acryl 26%, transparent +5.0D à +30.0D in 0.5D Schritten 1.457 à 35°C < 370 nm Multilink mit 4 Fixierpunkten Kein Winkel 0°
Optic Type: Overall diameter: Optical zone diameter: Material: Power: Refractive Index: Transmittance UV-cutoff $\leq$ 10%: Haptics: Angulation:	Bi-convex 9.0 to 13.0 mm 6.0 mm 26% hydrophilic acrylic, transparent +5.0D to +30.0D with 0.5D steps 1.457 at 35°C < 370 nm Multilink with 4 points attachments No angulation 0°

Figure :1 Light transmission of Info™ lens material

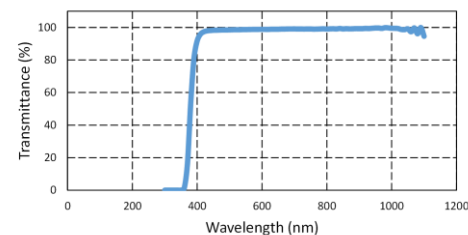


Figure: 2



LIO face antérieure  
IOL Vorderseite  
IOL front side

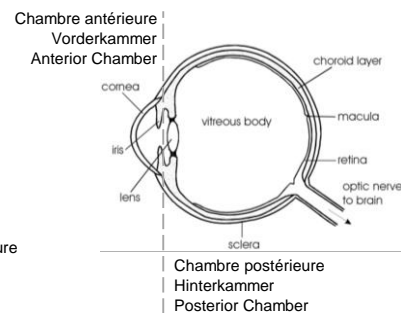


Figure: 3




Table: 2

	Numéro de série	Seriennummer	Serial number
	Date de fabrication	Herstellungsdatum	Date of Manufacture
	Fabricant	Hersteller	Manufacturer
	Date d'expiration	Haltbar bis	Used by
	Stérilisé par vapeur d'eau	Dampf-Sterilisation	Sterilized using steam
	Ne pas réutiliser	Nicht wiederverwenden	Do not reuse
	Consulter les instructions d'utilisation	Gebrauchsanweisung beachten	Consult instructions for use
	Attention, consulter les documents d'accompagnement	Achtung, beiliegende Dokumentation beachten	Caution, consult accompanying documents
	Garder hors de la lumière du soleil	Vor direktem Sonnenlicht schützen	Keep away from sunlight
	Garder sec	Trocken halten	Keep dry
	Conformité CE	CE-Kennzeichnung	CE-Conformity
	Limitation de température	Temperaturbeschränkung	Temperature limitation

ITA

ESP

PRT

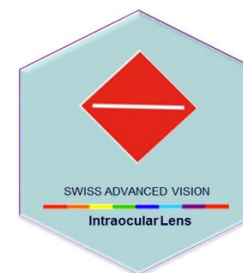

# InFo

Istruzioni per l'uso

Manual de instrucciones

Manual de instruções



**SAV-IOL SA**  
Route des Falaises 74  
2000-Neuchâtel  
Switzerland

[info@sav-iol.com](mailto:info@sav-iol.com)

Main number [+41 32 566 54 00](tel:+41325665400)

Phone regulatory affairs [+41 32 566 54 08](tel:+41325665408)

Fax regulatory affairs [+41 32 566 54 09](tel:+41325665409)



Specifiche tecniche  
Especificaciones técnicas  
Especificações técnicas

Table: 1

Tipo de óptica: Diámetro externo: Diámetro de zona óptica: Material: Alimentación: Índice de refracción Transmisión < 10%: Háptica: Angulación:	Biconvessa 9.0-13.0 mm 6.0 mm idrofila acrílico 26% trasparente +5.0D a + 30.0D con nessun 0.5D 1.457 nei punti di attacco di 35 ° C < 370 nm 4 Multilink on a 0 ° di angolo
Tipo de óptica: Diámetro externo: Diámetro de zona óptica: Material: Alimentación: Índice de refracción Transmisión < 10%: Háptica: Angulación:	Biconvexo 9.0 a 13.0 mm 6.0 mm Hidrofilico acrílico 26% transparente +5.0D a + 30.0D con ninguna 0.5D 1.457 35 ° C < 370 nm 4 Multilink no al ángulo 0 °
Tipo de óptica: Diámetro exterior: Diámetro da zona óptica: Material: Potência: Índice de refração Transmissão < 10%: Tâtil: Angulação:	Biconvexa 9.0 para 13,0 mm 6,0 mm Hidrofilica acrílica 26% transparente +5.0D a + 30,0D com nenhum 0.5D 1,457 em pontos de fixação de 35 ° C < 370 nm Multilink 4 Ângulo 0 ° não pode ser

Figure :1 Light transmission of Info™ lens material

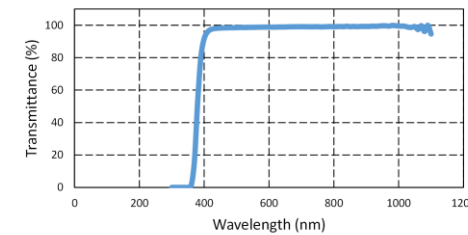


Figure: 2



Camera anteriore  
Frente IOL  
Frente IOL

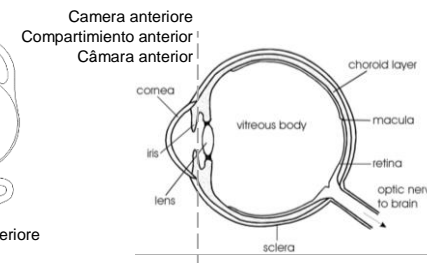


Figure: 3



Table: 2

	Numero di serie	Número de serie	Número serial
	Data di fabbricazione	Fecha de fabricación	Data de fabrico
	Produttore	Fabricante	Fabricante
	Data di scadenza	Fecha de vencimiento	Data de expiração
	Sterilizzato a vapore	Esterilizado por vapor	Esterilizada por vapor
	Non riutilizzare	No reutilizar	Não reutilizar
	Consultare le istruzioni per l'uso	Consulte las instrucciones de uso	Consultar instruções de cuidado,
	Attenzione, consultare la documentazione allegata	Atención, consulte los documentos adjuntos	Consultar acompanhamento documentos manter
	Tenere fuori del sole	Mantener fuera del sol	Se fora da conformidade seco de manter luz solar
	Mantenere asciutto	Mantenga seco	Manter seco
	Marcatura CE di conformità	Conformidad CE	Marcação CE de conformidade
	Limitazione di temperatura	Limitación de temperatura	Limitação de temperatura





